



Vantaggi chiave

- Ampio display touch screen a colori
- Intuitivo e semplice da usare
- Molteplici funzioni aggiuntive
- Protezione antimicrobica

Terminale di comunicazione CT Touch

Il terminale di comunicazione EZ CARE è appositamente progettato per gli ambienti sanitari. Le sue molteplici funzioni semplificano ed ottimizzano i processi di lavoro quotidiani.

Versatilità

Il terminale viene generalmente installato nelle stanze dei pazienti, nelle postazioni infermieristiche e nei locali ausiliari. È utilizzato principalmente per le comunicazioni tra il personale infermieristico ed i pazienti.

Premendo semplicemente il display touch screen, le chiamate attive possono essere memorizzate e messe in attesa ed i pazienti possono essere contattati direttamente per verificare le loro necessità ed ottimizzare i tempi di assistenza.

Protezione superiore contro le infezioni

Con le nostre unità di stanza, che incorporano un componente

antimicrobico, il rischio di infezione viene significativamente ridotto così come per la registrazione e segnalazione automatica della presenza che, attraverso il lettore tessere RFID integrato nel terminale, viene attivata senza contatto.

Display multifunzionale

Grazie all'esclusiva codifica a colori, le differenti tipologie di chiamata vengono chiaramente identificate anche a distanza.

Il menù del terminale touch screen, liberamente programmabile, rende l'utilizzo del terminale semplice ed immediato.

È inoltre possibile, scegliere e configurare funzioni aggiuntive, con una sola pressione del pulsante sul display, per ottimizzare i flussi di lavoro del personale di assistenza.

La sicurezza prima di ogni cosa

Il terminale CT Touch controlla tutti componenti della stanza a lui collegati e ne segnala lo stato alla stazione principale. Nei sistemi con connessione LAN, il nostro modulo ECS (Emergency Call System – sistema operativo unico e brevettato), offre ulteriori e maggiori livelli di sicurezza.

DIN VDE 0834

Il terminale di comunicazione CT Touch, è pienamente conforme alle normative DIN VDE 0834.

Processi gestionali aggiornati ...

Il nostro display multifunzionale dispone di molteplici funzioni operative per supportare il personale di assistenza anche negli ambienti di lavoro più critici ed impegnativi.



Display codificato a colori


Grazie all'esclusiva codifica a colori, le differenti tipologie di chiamate, sono facilmente identificabili anche a grande distanza (es. l'allarme cardiaco viene visualizzato su sfondo BLU).



Sono disponibili fino a 6 diversi pulsanti touch screen, liberamente programmabili. Una funzione operativa specifica, può essere selezionata con la semplice pressione di un tasto sul display.

Turni di cura

Per supportare il lavoro quotidiano del personale di assistenza, il nostro CT Touch consente di variare i turni di assistenza, tra turni diurni e notturni, in modo semplice ed immediato. Lo stato attuale può essere visualizzato a colpo d'occhio e può essere facilmente modificato se necessario.

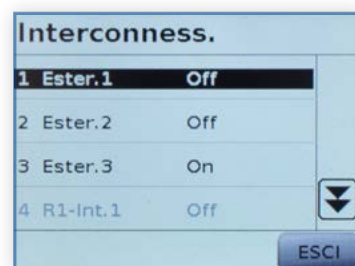

Annunci

Una delle funzioni più utilizzate in ambito sanitario, è la funzione "annunci". Le modalità ed i destinatari degli annunci, possono essere scelti dal menù, in base alle singole esigenze (es: annuncio all'interno di una reparto specifico).



Comunicazione diretta ad una stanza

Con la semplice pressione di un pulsante sul display touch screen, è possibile visualizzare e selezionare la camera con la quale si desidera mettersi in comunicazione.



... con nuove ed utili funzioni aggiuntive ...

Il terminale CT Touch, offre un valore extra grazie a funzionalità che supportano il flusso di lavoro organizzativo del personale di assistenza.



Promemoria attività automatizzato

Con questa funzione, si possono facilmente impostare i promemoria automatici in base ad un determinato orario (ore/minuti) a supporto di attività importanti in corso e ricorrenti, come ad esempio la somministrazione dei farmaci ad un determinato paziente.

Naturalmente, è possibile abilitare l'accesso e l'utilizzo del terminale CT Touch, tramite password personalizzate.

Stato della stanza

Attraverso i tasti sul display del terminale CT Touch, è possibile comunicare lo stato attuale della stanza. Con questa funzione, ad esempio, il personale addetto alle pulizie può essere facilmente avvisato se una stanza necessita di un'intervento di pulizia oppure, il personale viene avvisato automaticamente quando una stanza è pronta per essere occupata da un paziente.



Funzione telefono

Se il sistema di chiamata infermiere è integrato con il sistema telefonico della struttura, il terminale CT Touch, può essere utilizzato per effettuare o ricevere una chiamata indipendentemente da telefoni fissi e/o cellulari.

Funzione di "ascolto in camera"

Questa funzione è particolarmente apprezzata nei reparti neonatali. Il personale, per un determinato periodo di tempo, può "ascoltare" all'interno delle stanze selezionate. Se in una di quelle stanze, è segnalata la presenza, il sistema automaticamente, non consente di effettuare l'ascolto in camera.



... e svariate integrazioni

L'integrazione di diverse tecnologie aggiuntive consente ulteriori possibilità per aumentare la sicurezza e alleviare la pressione sul personale di assistenza.

Presenza senza contatto, per ridurre le infezioni

Il nostro terminale CT Touch è completo della tecnologia RFID (standard). La segnalazione della presenza, senza contatto al terminale, supporta la struttura nella prevenzione e nel controllo delle infezioni. Inoltre, tutta l'attività e tutti gli eventi, eventi, possono essere registrati automaticamente, per una successiva valutazione.



Tessera e TAG RFID



Trasmittitore IR/RF

Presenza automatica

Quando si entra in una stanza, il sistema riconosce automaticamente il personale di assistenza corredato dal proprio badge e genera una notifica di presenza. I badge sono completi anche un pulsante integrato per poter effettuare una chiamate di emergenza

Funzione integrata per la localizzazione in tempo reale

I ricevitori del sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS), possono essere facilmente collegati direttamente al terminale CT Touch. Questo consente una grande riduzione ed ottimizzazione dei costi, non dovendo provvedere all'aggiunta di una rete di cablaggio separata.



Ricevitori IR/RF per il montaggio a soffitto



Trasmittitore di allarme portatile e ricevitore ad infrarossi

Trasmittitori di allarme portatili

Questi trasmettitori manuali sono ideali per il personale di assistenza che spesso opera in aree e situazioni molto critiche e per il quale potrebbe essere necessario chiedere aiuto in caso di emergenza. I ricevitori da soffitto ad infrarossi associati, sono collegati direttamente al terminale di comunicazione CT Touch.